

高纯锗伽马能谱自动进样系统

Cytech 常用科技



AF09HPGe

伽马能谱测量 自动换样器

无人值守，自动出报告
可基于现有谱仪系统升级



公众号



观看视频介绍

广东常用科技有限公司

18122131988/17322220988

0757-81260559

WhatsApp: +86 18122131988

sales@cytech.world


sales1changyong@gmail.com

<http://www.cytech.world>

佛山市南海区狮山镇软件园桃园路南海
产业智库城一期A座

【伽马能谱自动测量系统】

- ▶基于ORTEC产品开发，用于伽马能谱仪自动化换样，可兼容不同型号高纯锗探测器，可基于现有的谱仪系统升级；
- ▶提供了一套由样本管理软件和能谱测量分析软件组成的操作系统；前者负责调度测量，后者负责伽马能谱分析，并自动出分析报告；
- ▶解决实验室测量中存在的问题：不能及时更换完成测量样品、忘记部分样品信息、样品信息重复或者混淆错误。

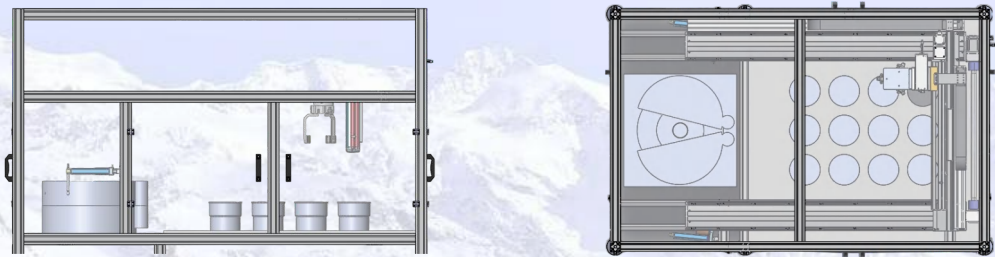


【应用领域】


- ▶适用于核电站、环境保护、公共卫生等监测机构和科研院所的实验室，实现批量全自动的伽马能谱测量及各种尺寸和类型的马林杯样品分析需求，无人值守，自动出报告。

【技术优势】


- ▶自动出报告；
- ▶无人值守的样品测量，最大限度提高样品处理量，减少人工；
- ▶自动和手动模式自由切换；
- ▶兼容各种样品尺寸，内置不同样品刻度文件，分析时调用即可；
- ▶一次性12个不同尺寸样品批量处理测量；
- ▶用户自定义样品参数，设定测量顺序、时间、不同尺寸样品盒等，自动换样并测量；
- ▶兼容不同型号高纯锗探测器，可基于现有的谱仪系统升级。

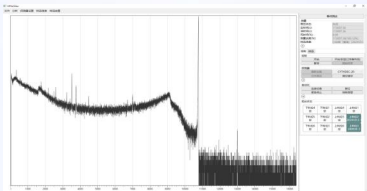

(软件主界面)

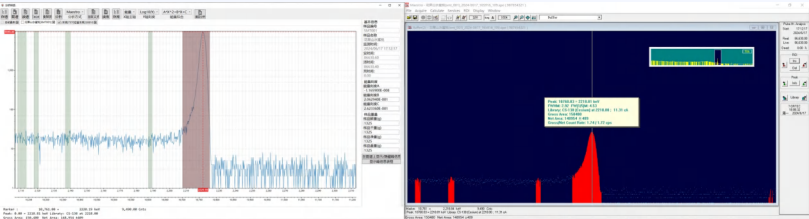

(能谱分析)

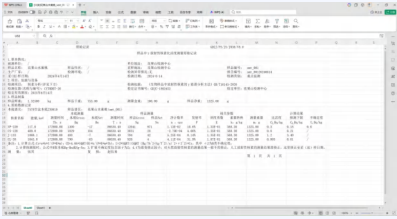

(导出报告)

【技术参数】

型号	AF09HPGe	电力要求	220V/50Hz，13A（最大值）
尺寸	2000×1300×2300mm（尺寸可定制）	马林杯容量	0.25升至2.5升（可兼容不同型号样品杯）
屏蔽室	可兼容不同型号铅室，开门机构根据铅室定制(可选10cm和15cm低本底铅室)		
控制系统	国产		



视频号



销售微信



bilibili



You tube